


取扱説明書

各部の名称

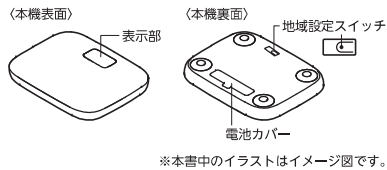

※本書中のイラストはイメージ図です。

付属品

- 取扱説明書（保証書付き）
- お試し用電池
- 単3形アルカリ乾電池（LR6）× 2本
- 地域設定の地図

安全上のご注意

本書では、お使いになる人や他人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただきたいことを次のように説明しています。本文をよくお読みいただき、安全に正しくお使いください。

- 警告** この表示の欄は、「人が死亡または重傷を負うおそれのある」内容を表示しています。
- 注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害が発生するおそれのある」内容を表示しています。
- してはいけない「禁止」内容を示しています。
- 「必ず守っていただく」内容を示しています。

警告

- 禁止** 本機の端に乗ったり、飛び乗ったり、跳びはねたりしない。転倒したり、すべったりして大けがをすることがあります。
- 天井面やぬれた床など、すべりやすい所では使わない。転倒したり、すべったりして大けがをすることがあります。また、本機内部に水が侵入し故障の原因になります。

注意

- 禁止** 表示部の上に乗らない。転倒したり、破損してけがをすることがあります。また、故障の原因になります。
- 隙間や穴に指を入れない。けがをすることがあります。
- 充電式の電池は使用しない。定格電圧が1.2V以下の充電式電池は、誤動作や故障の原因となります。
- 新しい電池と古い電池、種類の違う電池を同時に使用しない。液漏れや発熱、破裂のおそれがあり、本機の故障、けがなどの原因になります。
- 乳幼児には、絶対に持ち運びさせない。落として、けがをすることがあります。

- 禁止** 業務用（病院等での測定）には絶対に使用しない。業務用として病院等で使用するための機能を備えておりません。
- 熱湯、ベンジン、シンナー等の薬品を使用しない。本機の損傷や故障の原因となります。汚れたときは、水または家庭用中性洗剤を柔らかい布に浸し、固く絞って拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。
- 分解や水洗いをしない、過度の衝撃や振動を与えない。本機の損傷や故障の原因となります。
- 以下の場所で本機を保管・使用しない。本機の損傷や故障の原因となります。
 - 直射日光のある場所、暖房器具の近く、または空調機の風が直接当たる所
 - 温度変化の激しい所
 - 湿気の多い場所や水気のある所
- 体の不自由な方がご使用になるときは、1人で測定しない。介護者が援助するか、手すりの利用をおすすめください。（※手すり等を利用した場合、測定結果は参考値として捉えてください。）
- 電池を入れるときは、極性（ \oplus 、 \ominus ）の方向を間違わない。液漏れなどで、床等を汚損するおそれがあります。（長期間ご使用にならない場合は、電池を本機から取りはずしてください。）
- ぬれた体で乗らない。体や足の水分をよく拭いてから測定してください。転倒してけがをすることがあります。
- 携帯電話や電子レンジなど電波を発する機器を本機の近くで使用しない。誤動作して正確に測定できないおそれがあります。

仕様

型番	MJ-WS1K
計量範囲	0～150kg
最小表示	100g (0～100kg) 200g (100～150kg)
ステップオン荷重	12kg以上
電源	DC3V 単3形アルカリ乾電池（LR6）× 2本（付属）
消費電流	最大 30mA以下
本体寸法	D208 × W265 × H35mm
重量	約 750g（乾電池含む）

※デザイン及び製品仕様は予告なく変更する場合があります。

計量精度

本機は JIS（家庭用はかり）に定められた技術基準で製造し、厳重な検査のうえ出荷しております。なお、ご使用の場合、はかりられた体重に対して下記の範囲まで精度を保証します。

0kg から 75kg までをはかる場合	± 200g
75kg を超え 100kg までをはかる場合	± 300g
100kg を超え 150kg までをはかる場合	± 600g

ご家庭で体重をはかることを目的に作られていますので、物品の売買取引や目方を証明する場合にはご使用になれません。



HDR017601(0)-1604MA

初期設定のしかた

高精度のはかりは、使用地域により重力の影響を受け、誤差を生じる場合があります。本機はご使用になる地域を設定することにより、この誤差を解消することができます。

- 本機裏面の電池カバーを開けてください。
⇒ 電池カバーは、はずれます。本機の表示に合わせて電池を入れ、閉めます。
- 本機裏面の地域設定スイッチを押して、別紙「地域設定の地図」からお住まいの地域コード（00～09）を選択します。
※地域設定スイッチを押すたびに地域コードが切り替わります。
※「R5」にお住まいの方は、2.の操作は不要です。
※工場出荷時は「R5」に設定されています。
番号が選択されて3秒後に電源が切れ、地域が設定されます。
- 硬く平らな安定した所に置いてください。表示が消えている事を確認し、本機中央を踏んでください。
「8888」が表示されたら、本機から降りてください。「00」が表示されたら測定可能です。
※電池交換後や「Err」表示後は、一度表示が消えてから3.の操作を行ってください。
※地域を変更する場合は、2.の操作を行ってください。

以上で初期設定は終了です。

電池の交換

- 電池が消耗してくると「Lo」が点灯します。新しい電池と交換してください。（精度の保証ができません）
- 電池を交換した後は「初期設定のしかた」の3.の操作を行ってください。
- 定格電圧が1.2V以下の充電式電池は誤動作や故障の原因となります。指定の電池をご使用ください。
- 古い電池は、お住まいの市区町村の破棄方法に従って処理してください。
- 電池の寿命は約1年です。（1日に5回はかった場合）
- 付属の「お試し用電池」は工場出荷時に納められたものですので、寿命が短くなっている場合があります。

使用上のご注意

こんな保管をしたとき

本機を立てかけたり、物の上に置いた状態で保管した後にご使用になると、測定値に誤差を生じる場合があります。この場合、以下の操作を行ってください。

- 硬く平らな安定したところに置いてください。
 - 本機中央を踏み、降りてください。表示がつかめます。
 - 再度、本機中央を踏み、降りてください。表示が消えます。
- 以上の操作を行ってからはかってください。

- 硬く平らな安定した所でご使用ください。
- じゅうたんや、畳の上ではご使用できません。
- コルク床やクッションフロアなど、やわらかい床でご使用になると、凹みなどの跡が残る可能性があります。
- ※ご使用前に目立たない場所（ご使用される場所の隅の方など）でご確認ください。
- 測定値が最大計量をこえている場合は「OL」を表示します。

はかりかた

- 硬く平らな安定した所に置き、本機に乗ります。自動的に電源が入り、体重が表示されます。
 - 体重が確定すると表示部にO印が表示されます。自動的に電源が入り、体重が表示されます。
 - 点滅表示してから約20秒経つと、「OFF」が表示され電源が切れます。
※12kg未満の場合は、自動的に電源が入りません。一度本機中央を踏み、「00」が表示されてから乗ってください。
※測定後表示が消えるまで本機を動かさないでください。
※本機に乗ってから30秒以内に数値が安定しない場合は自動的に電源が切れます。
- 以上ではかりかたは終了です。

保証書

持込修理

- 無料修理規定
本書は、本書記載内容で、無料修理をさせていただきますことをお約束するものです。
- お客様の取扱説明書、本書添付ラベルなどの注意事項による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合は、商品と本書をご持参、ご指示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。無料修理をさせていただきます。
 - なお、保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または直接（株）良品計画お客様室へご相談ください。
 - 次のような場合は、保証期間中でも有料修理になります。
 - ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷。
 - 火災、爆発、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。
 - 本書のご指示がない場合。
 - 本書は、お客様名、お買い上げ日の記入がなく、レシートの貼り付けがない場合。
 - 一般的な家庭用以外（たとえば業務用など）にご使用の場合の故障および損傷。
 - ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保証上の不備による損傷。
 - 本書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
 - ご購入の場合、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
 - 贈り物などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼できない場合は、直接（株）良品計画お客様室へご相談ください。

型番	ヘルスマーター MJ-WS1K
保証期間	本体 本ご購入日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お住所	様
お客様名	様
電話	() 様

保証書貼付用レシート貼付欄

- レシートが未貼り付けの場合は無効です。
- 保証期間：お買い上げ日より1年以内。日本国内のみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- ※ ネットストアご購入の場合、お買い上げレシート（店舗印）の同梱はございません。お買い上げ日は、ネットストアマイページ（注文履歴）にてご確認ください。
- ※ お客様にご記入いただいた保証書（個人情報）は、修理・サービスに利用させていただきます。
- ※ この保証書は本書によって明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものではありません。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の第三者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、ご不明の場合は、直接（株）良品計画お客様室へお問い合わせください。

販売元	製造元
株式会社 良品計画	株式会社 タニタ
〒170-8424	〒174-8630
東京都豊島区東池袋4-26-3	東京都板橋区前野町1-14-2
お客様室 ☎0120-14-6404	
平日 10:00～21:00	
土・日・祝 10:00～18:00	

アフターサービスについて

- 保証書に「お買い上げ日」の記入と「保証書貼付用レシート」が貼り付けられているかご確認ください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。
- 保証期間：お買い上げ日から1年間です。
- 修理依頼されるとき
取扱説明書の内容をお読みいただき、直らないときはお買い上げの販売店または（株）良品計画お客様室に修理をご相談ください。
- 保証期間中の修理
保証書の規定により無料修理します。商品に保証書を添えてお買い上げの販売店または（株）良品計画お客様室までお申し出ください。
- 保証期間が過ぎている修理
修理により使用できる製品は、お客様の要望により有料修理させていただきます。（株）良品計画お客様室にご相談ください。
- アフターサービスについてご不明の場合
下記（株）良品計画お客様室にお問い合わせください。

技術料	故障した商品の修理および部品交換などの作業にかかる料金を指します。
部品代	修理に使用した部品代金を指します。

（修理部品について）
修理部品は、部品共通化のため、一部仕様や外観色などを要する場合があります。

販売元 株式会社 良品計画
お客様室 ☎0120-14-6404
(平日 10:00～21:00 土・日・祝日 10:00～18:00)
〒170-8424 東京都豊島区東池袋 4-26-3