

# 無印良品

電動歯ブラシ(携帯用ケース付)

形名 NTB-MJ1

## 取扱説明書

広げてお読みください

- このたびは電動歯ブラシ(携帯用ケース付)をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございます。
- お求めの電動歯ブラシ(携帯用ケース付)を正しく使っていただく為にお使いになる前に取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになったあとは、必ず保管してください。

### もくじ

|          |     |
|----------|-----|
| 安全上のご注意  | 1   |
| 使用上のご注意  | 1   |
| 各部のなまえ   | 2   |
| 乾電池の入れかた | 2   |
| ご使用方法    | 3   |
| 上手な磨きかた  | 3~4 |
| お手入れのかた  | 4   |
| 別売品について  | 4   |
| 主な仕様     | 4   |

保証書付

2804

### 取扱説明書

※ご使用前に取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。  
また保証書(本書)及び取扱説明書は必ず大切に保管してください。

## 安全上のご注意

※ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。  
※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は次のように区分しています。  
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

### 絵表示の例

|   |   |
|---|---|
|  | ○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。       |
|  | ●記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は一般的な強制)が描かれています。 |

 **注意** : 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容


|   |   |
|---|---|
|  <ul style="list-style-type: none"><li>●改造しない。また修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。<br/>火災・感電・ケガの原因となります。修理はお買いあげの販売店または当社指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。</li></ul> |  <ul style="list-style-type: none"><li>●歯グキにブラシを強く当てすぎない。<br/>歯グキを傷めたり、故障の原因となります。歯周病(歯肉炎・歯周炎・歯槽膿漏)の方は歯科医にご相談ください。</li></ul> |
|  <ul style="list-style-type: none"><li>●お手入れの際は必ずスイッチをOFFにする。<br/>ケガの原因になります。</li></ul>  |  <ul style="list-style-type: none"><li>●歯磨き以外の目的に使用しない。<br/>ケガの原因になります。</li></ul>  |

※乾電池は電池の注意表示に従って正しくご使用ください。

## 使用上のご注意

- 本体を水中に放置しないでください。故障の原因になります。
- 本体を落としたりしないでください。故障の原因になります。
- ストーブなど高熱のものに近づけないでください。変形や故障の原因になります。
- 本体を直射日光・高温・高湿の場所(夏場の車内など)に放置しないでください。故障の原因になります。
- 本体はスイッチをONのまま放置しないでください。
- 本体のお手入れにはベンジン、シンナーなど揮発性のものを使わないでください。汚れは水または中性洗剤を含ませた布で拭き取って、その後水気もよく拭き取ってください。
- 動いているブラシを無理に手などで動きを止めたりしないでください。故障の原因になります。
- お子様や体の不自由な方が使用する場合は正しい使い方を教えてあげてください。
- 歯の治療中の方、歯や歯グキの病気の方は、歯科医にご相談の上ご使用ください。

## 各部のなまえ

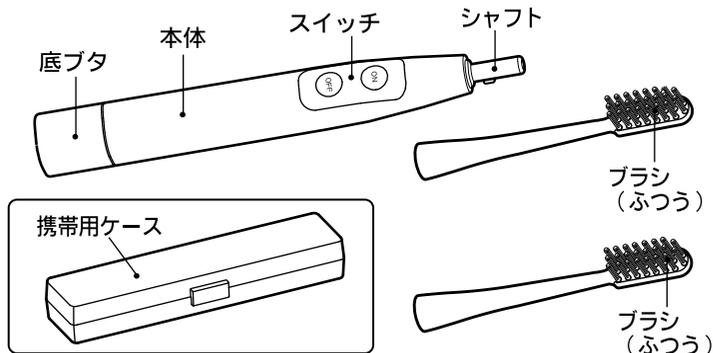


**乾電池の入れかた** (※乾電池は別売りです。必ず単4形アルカリ乾電池をご使用ください。)

スイッチは必ずOFFにして

### 1. 底ボタンを外して、単4形アルカリ乾電池を入れる

- 底ボタンの ◯マーク③を本体部の ◯マーク④の位置までまわして外します。
- 乾電池は ⊕ 側を先にして本体に入れます。

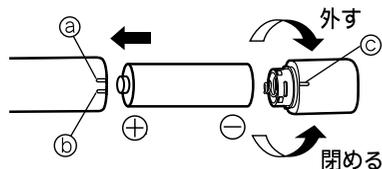

※確実に閉まっていない場合は水が内部に入り、故障の原因となります。

### 2. 底ボタンを取り付ける

- 底ボタンの ◯マーク③を本体部の ◯マーク④に合わせると入れ、③の位置までまわします。

#### 使用回数目安

単4形アルカリ乾電池1個で、1日に2回(1回2分使用の場合)のご使用で約3ヶ月使えます。(室温〔約20℃〕にて使用時)(サンヨーアルカリ乾電池LR03使用の場合)


- 乾電池をお取り替えの時は、本体の水気をよく拭き取って、水滴が中に入らないようにご注意ください。
- 乾電池は長期間使用しない場合や、消耗して使えなくなった場合は、本体より取り出してください。
- 振動がにぶくなったり、力が弱くなってきた時は新しい乾電池と交換してください。

## ご使用方法


### 1. ブラシを差し込み、歯みがき剤をつける

- ブラシの ◯マーク①をシャフト部の ◯マーク②に合わせながら差し込み、③の位置までまわします。

※外す時は逆の手順(逆方向にまわして)でブラシを外してください。

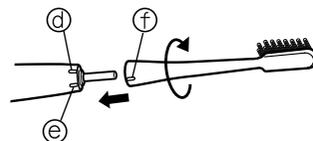


<正しい持ち方>

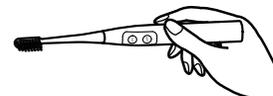

### 2. ブラシを口に入れてからスイッチをONにする

### 3. ご使用後、きれいに水洗いする

- 本体は水分はよく拭き取り、ブラシはよく振って水気を切ってください。

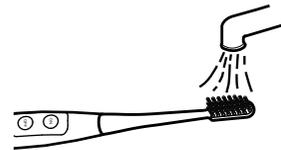

## 上手な磨きかた


◆細かい振動で汚れを落とし、歯グキにマッサージ効果を与えます。歯に軽く当ててご使用ください。

- 通常の歯磨きと同じように、普通に磨いてください。
- 歯ブラシを歯グキに強く当てすぎないように注意してください。



### 1. 歯と歯グキの間に当てる


- 歯と歯グキの境目は軽く当ててください。

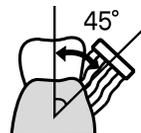

### 2. 歯のかみ合わせ面に沿ってブラシを動かす (2~3歯ずつ3~5秒間)



### 3. 歯の表面と裏側も忘れずに

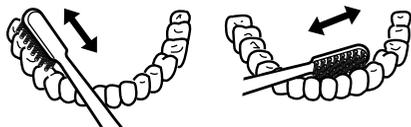


### お手入れのしかた

- 本体の汚れはベンジン、シンナーなど揮発性のものを使わないで、水または中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。
- 本体シャフト部は汚れがたまりやすいので、1～2週間に1度は水洗いしてください。

### 1. スイッチをOFFにして、ブラシを外す

### 2. 本体、ブラシを水洗いする

- 水洗い後は、よく振って水気を切ってください。

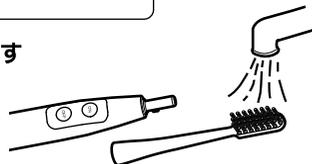

### 別売品について (お買いあげの販売店でご購入ください。)

ブラシは消耗品です。毛先がひろがってきたら交換の時期です。ブラシは2～3ヶ月を目処に早めに交換してください。

- 交換用ブラシは本体をお買い上げの販売店にて別売のNTB-MJ1用スベア歯ブラシをお買い求めください。

| 品番         | 入数 |
|------------|----|
| NTBS-B1NMJ | 2  |

### 主な仕様

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 電源     | DC1.5V (単4形アルカリ乾電池LR03 : 1個)       |
| 外形寸法   | 15.5 x 15.5 x 189 mm (本体 : ブラシ装着時) |
| 質量     | 19 g (乾電池別、ブラシ装着時)                 |
| 振動数    | 約10,000回/分 (無負荷時)                  |
| 使用温度範囲 | 0～40℃                              |
| 付属品    | ブラシ (2)、携帯用ケース (1)                 |

### アフターサービスについて

#### 1 保証書 (この取扱説明書に印刷されています)

- 保証書は必ず「お買いあげ日・取扱販売店名」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間は1年間です。

#### 2 修理を依頼されるときは

- 保証期間中の修理  
保証期間中でも、有料になることがあります。くわしくは、保証書をごらんください。
- 保証期間が過ぎたあとの修理  
有料修理いたします。くわしくは、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

#### 3 補修用性能部品の保有期間

- この電動歯ブラシの補修用性能部品を製造打切後、5年保有しています。性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 4 アフターサービスのお問い合わせ

- 修理・点検に関するご相談・ご不明な点は、もよりの「お客様ご相談窓口」(下記)にお問い合わせください。

### お客様ご相談窓口

#### 修理サービスについてのご相談 三洋コンシューママーケティング(株)

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:30

土曜・日曜・祝日 9:00～17:30

|        |          |            |                      |                                  |
|--------|----------|------------|----------------------|----------------------------------|
| 修理相談窓口 | 東コールセンター | 関東・甲信越地区   | 東京<br>福島<br>新潟<br>長野 | 050-3116-2222<br>東京(03)5302-3401 |
|        |          | 北海道地区      | 札幌                   | 050-3116-2333                    |
|        |          | 東北地区       | 宮城<br>大阪             | 050-3116-2444                    |
|        | 西コールセンター | 近畿・北陸・四国地区 | 大分<br>金沢<br>高松       | 050-3116-2555<br>大阪(06)4250-8400 |
|        |          | 中部地区       | 名古屋                  | 050-3116-2666                    |
|        |          | 中国地区       | 広島                   | 050-3116-2777                    |
| 九州地区   |          | 福岡         | 050-3116-2888        |                                  |

沖縄地区 沖縄 098-9444-5018

受付時間：月曜日～土曜日 9:00～12:00、13:00～17:30 (日曜、祝日および当社休日を除く)

#### 持込み修理および部品についてのご相談 三洋コンシューママーケティング(株)

受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30 (日曜、祝日を除く)

持込み修理および部品については、各地区サービスセンターで承っております。

☆上記のお客様ご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

**お客様ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて**

お客様ご相談窓口でお受けした、お客様のお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託の場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

**<利用目的>**

●お客様ご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機(株)および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

**<業務委託の場合>**

●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対して当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、ホームページ<http://www.sanyo.co.jp>をご覧ください。

販売元：株式会社 良品計画

製造管理元：三洋電機コンシューマ  
エレクトロニクス株式会社

家電事業部 〒675-2332 兵庫県加西市鎮岩町194-4

**無料修理規定**

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買いあげの日から右記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとつき、お買いあげの販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買いあげの販売店にご依頼ください。

- 保証期間内で次のような場合には有料修理となります。
    - イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
    - ロ. お買いあげ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
    - ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
  - 二. 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
  - ホ. 本書の提示がない場合。
  - ヘ. 本書にお買いあげ日、お客様名、取扱販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - ト. プランの損傷の場合。
- 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料や、出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。
  - ご転居の場合は事前にお買いあげの販売店にご相談ください。
  - ご贈答品等で本書に記入してあるお買いあげの販売店に修理をご依頼になれない場合には、別項の「お客様ご相談窓口」をご覧くださいのうえ、もよりの窓口にお問い合わせください。
  - 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
  - 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

- この保証書は、本書に明示した期間及び条件のもとにおける無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はお買いあげの販売店または別紙記載の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間についての詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。

|   |  |
|---|--|
| <p><b>無印良品</b><br/> <b>電動歯ブラシ(携帯用ケース付)</b><br/> <b>保証書</b></p>  |  |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">持込修理</div>   |  |
| 形名  | NTB-MJ1                                    |
| お買い上げ日  | 年 月 日                                      |
| 保証期間  | お買い上げ日より<br><b>本体 1 年</b><br>(ただしブラシは除きます) |
| お客様   | 〒  |
|   | ご住所  |
| 販売店   | 〒  |
|   | ご芳名  |
| 住所店名  | 様  |
| この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買いあげの日から上記保証期間中に、取扱説明書・本体ラベル・その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとつき、お買いあげの販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証書をご提示のうえ、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。<br>※印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。 |  |

販売元：株式会社 良品計画  
 〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3  
 お客様室でんわ 03-3989-5200  
 土・日を除く 10:00~17:00

製造管理元：三洋電機コンシューマ  
 エレクトロニクス株式会社  
 〒675-2332 兵庫県加西市鎮岩町194-4