


使用說明書

各部位名稱

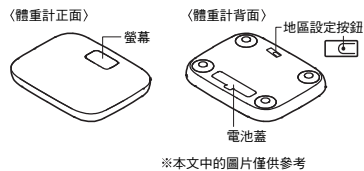

附屬品

使用說明書
試用電池
3號鹼性乾電池(LR6)x2
地區設定地圖

安全須知

為保護用戶及他人免受人身傷害或財產損失，在使用前請務必閱讀此安全須知，並正確使用本產品。請先閱讀以下表示內容，並請遵守內容所記載事項。

	警告 若操作不當可能導致死亡或重傷。
	注意 若操作不當可能造成受傷或物品損害。
	為禁止的項目
	為務必遵守的項目

警告

	禁止 請勿站在機器的邊緣，且勿跳上機器或在上面蹦跳可能跌倒或滑倒，導致嚴重受傷。
	禁止 請勿在瓷磚或潮濕的地面等易滑的場所使用可能跌倒或滑倒，導致嚴重受傷。此外，有水進入機器內部可能造成故障。

注意

	禁止 請勿站立在螢幕上可能跌倒、商品破損而導致受傷。也可能造成機器故障。
	禁止 請勿將手指放入縫隙或孔洞中可能導致受傷。
	禁止 請勿使用充電電池 額定電壓不足1.2V的充電電池可能導致誤動作或故障。
	禁止 請勿同時使用新電池和舊電池或不同種類的電池可能發生漏液、發熱和破損等情況，導致機器故障或受傷。
	禁止 請勿讓嬰幼兒搬運 可能因為掉落導致受傷。

	禁止 請勿用於(醫院的檢查測量等)商業用途 本產品不具備在醫院使用等商業用途的功能。
	禁止 請勿使用熱水、稀釋劑、汽油等藥劑 可能導致機器損壞或發生故障。如需清潔請將軟布浸入清水或家中性洗滌劑中，用力擦乾後擦拭，再用乾布擦拭。
	禁止 請勿拆卸或水洗，請勿使其遭受過度的振動或撞擊 可能導致機器損壞或發生故障。
	禁止 請勿在以下場所保管或使用 可能導致機器損壞或發生故障。 • 陽光直射處、暖氣設備附近、空調風口直吹的場所 • 溫度變化較大的地方 • 濕氣較重、較為潮濕的地方
	務必遵守 行動不方便的人士請勿獨自使用 建議由看護人員幫助使用或借助扶手使用。 (※抓著扶手測量時測量結果僅供參考)
	禁止 裝入電池時，請依照正負極的方向正確裝入 可能導致漏液、地板污損等情況。 (長時間不使用的情况下，請將電池從機器中取出)
	禁止 請勿在身體未擦乾的情況下使用 請先擦去身上或腳上的水分後進行測量。否則可能跌倒受傷。
	禁止 請勿在本機器附近使用手機或微波爐等會發出電波的設備 可能導致誤動作，無法測得準確的數值。

規格

型號	MJ-WS1K
測量範圍	0~150kg
最小刻度	100g(0~100kg) 200g(100~150kg)
自動啟動重量	12kg以上
電源	DC3V 3號鹼性乾電池(LR6)x2(附屬)
使用電流	最大不超過30mA
本體尺寸	長208 x 寬265 x 高35mm
重量	約750g(含電池)

※外形及產品規格可能在未經通知的情況下出現變更。

測量精度

本機器是根據JIS(家用測量計)所規定的技術標準製造的，並通過了嚴格的品質測試。在使用中，根據體重不同，可以保證以下範圍內的精度。

0kg至75kg	±200g
75kg至100kg	±300g
100kg至150kg	±600g

本產品是以在家中測量體重為目的製造的，請勿在物品買賣或重量證明等場合使用。



HDR017601(O)-1604MA

初始設定方法

高精度的體重計可能因為使用地區的重力不同而出現誤差。透過設定本產品的使用地區，可以消除重力影響帶來的誤差。

- 請打開機器背面的電池蓋。
⇒ 電池蓋可取下。
根據機器上的正負極顯示安裝電池，重新蓋上電池蓋。
- 按下機器背面的地區設定按鈕，從附屬的「地區設定地圖」中選擇所在地的編碼 (R0 ~ R9)。
※ 每按一次地區設定按鈕地區編碼即隨之切換。
※ 如果您位於「R5」地區，則無需進行2.的操作。
※ 出廠時使用地區已被設定為「R5」。
選擇編碼3秒後將自動關機，地區設定完成。
請放置在堅硬且平穩的場所使用。確認顯示消失，再站到機器中央上方。
- 出現「8888」字樣後，請從機器上下來。
出現「00」即代表可以進行測量。
※ 更換電池後或顯示「Err」時，請先等到顯示消失後再進行3.的操作。
※ 若要更改使用地區，請進行2.的操作。
以上操作即完成初始設定。

電池更換

- 電池電量不足時「Lo」會亮起，請更換新電池。(否則無法保證精度)
- 更換電池後請進行「初始設定方法」中的3.的操作。
- 額定電壓為不足1.2V的充電電池可能導致誤動作或故障。請使用指定的電池。
- 使用後的電池請按各地區規定的方法進行報廢處理。
- 電池壽命為1年。(1天測量5次的情况下)
- 產品附屬的試用電池是在出廠時裝入的，其壽命可能較短。

使用注意事項

<在經過以下保管方式之後>

將本機器豎著放置，或保管時在機器上放置物品再使用時，測量結果可能出現誤差。這種情況下請進行以下操作。

- 放在堅硬且平穩的場所。
- 站在機器中央再下來，此時螢幕出現顯示。
- 再次站在機器中央再下來，螢幕顯示消失。
請在進行以上操作之後再測量。

- 請在堅硬且平穩的場所使用。
- 請勿在地毯或榻榻米的上面使用。
- 在軟木地板等軟質地面上使用後，可能留下凹陷等痕跡。
※ 在使用前請先在出現凹陷也不明顯的位置(角落等)進行確認。
- 測量值超過最大測量範圍時會顯示「OL」。

測量方法

- 將機器放在堅硬且平穩的位置，站上機器。
體重計將自動啟動顯示體重值。
- 體重值確定後螢幕將出現○標示並閃爍。從機器下來。
- 螢幕閃爍約20秒後將顯示「OFF」並自動關機。
※ 若測量重量小於12kg，電源不會自動啟動。請先以腳踏機器中央待顯示「00」後即可進行測量。
※ 測量後，在顯示消失之前請勿移動體重計。
※ 站上機器30秒之內數值仍未穩定情況下將自動關機。

無印良品 保證書

條碼	38967378
品名	體重計
機號	型號：MJ-WS1K
保固期限	※保固期限：1年

購買門市店章
本證書不會補發，請妥善保管。

※本保證書，依照所刊載之品項提供保固服務。
※電器類商品無提供維修服務。
※保固期間內若發生故障至門市洽詢時，請提出本保證書，若無保證書，恕無法受理保固服務。
※若未加蓋門市店章，本保證書則視為無效。

本保證書，依照下列刊載之內容，提供保固服務。
1.顧客依照使用說明書、機器上所貼標籤等的注意事項，於正常使用情況下，在保固期間內產生故障時，請攜帶商品、配件與保證書洽詢本公司各門市。※網路通路門市販售除外，請與原購買通路洽詢。
2.若出現下述情況，雖在保固期內恕無法提供相關服務。
①錯誤使用方式或不當的修理與改造所造成的故障或損傷。
②購買後因摔落或搬運上所造成的故障及損壞。
③火災、瓦斯爆炸、地震、風災、水災、打雷、異常電壓及其他的天災地禍所造成的故障及損壞。
④未能出示或提供本保證書時。
⑤保證書上未註明購買日期及購買門市，或是字句遭受到修改時。
⑥於一般家庭用以外(例如業務用等)的用上所造成的故障及損壞。
⑦使用後的傷痕、變色、污損及保管不當所造成的損壞。
⑧消耗零件及配件的更換(如電池、燈管、遙控器、電線、錶帶等)。
3.部分商品提供零件販售，相關事宜請洽本公司各實體門市或致電客服專線。
4.本證明書僅限中華民國境內使用有效。

授權：良品計畫 株式會社
進口商：台灣無印良品股份有限公司
地址：台北市東興路8號8樓
客服電話：(02)2762-8151
網址：http://www.muji.tw
製造商：TANITA Corporation
地址：174-8630 東京都板橋區前野町1-14-2